

Glutamic Acid Content Assay Kit

谷氨酸(Glu)含量测定试剂盒说明书

货号: G0416W | 方法: 微板法 | 规格: 96 样

一、产品简介:

谷氨酸广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，不仅是组成蛋白质的 20 种氨基酸之一，也是细胞代谢中的关键分子。此外，谷氨酸不仅是哺乳动物神经系统中最丰富的快速兴奋性神经递质；也存在于多种食品中，并已用作食品工业中的增味剂。

本试剂盒提供一种快速、灵敏的检测谷氨酸的方法，利用谷氨酸脱氢酶特异作用于底物谷氨酸，同时使生成的物质进一步与显色剂反应生成黄色物质，该黄色物质在 450nm 处有最大吸收峰，进而得出谷氨酸的含量。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 70mL×2 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 4mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉体 mg×2 支	-20℃保存	用前甩几下使试剂落入底部，每支再加 0.65mL 蒸馏水溶解，可-20℃分装冻存。
试剂三	液体 2mL×1 瓶	4℃保存	用前甩几下使试剂落入试管底部，避免试剂浪费。
标准品	粉体 mg×1 支	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、可调式移液器、研钵、水浴锅、冰、蒸馏水。

四、谷氨酸(Glu)含量测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品和实验流程，避免样本和试剂浪费！

1、样本制备:

- ① 组织样本: 0.1g 组织样本（水分充足的样本建议取 0.5g 左右），加入 1mL 提取液，冰浴匀浆；室温 8000rpm，离心 10min，上清液待测。
- ② 高蛋白含量样本: 取 0.1g 组织样本，加适量高氯酸（1M）研磨样本，再用 KOH（5M）调溶液 PH 值至约 8，两次液体体积记为 V2；粗提液全部转移到 EP 管中。室温 8000rpm 离心 10min，上清液待测。
- ③ 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；室温 8000rpm 4℃离心 10min，上清液待测。

【注】: 若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（ 10^4 ）: 提取液（mL）为 500~1000: 1 的比例进行提取。

- ④ 液体样品: 近似中性的液体样品可直接取 1mL 转移到 EP 管中；室温 8000rpm，离心 10min，上清液待测。

酸性液体样本（如葡萄酒或果汁），则需先用 KOH（5M）调溶液的 PH 值至约 8，并在室温下孵育 30 分钟。取 1mL 转移到 EP 管中；室温 8000rpm，离心 10min，上清液待测。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 450nm。
- ② 所有试剂可于 25℃水浴锅中孵育 15min 左右。
- ③ 于 96 孔板中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
提取液	140	150
试剂一	20	20
试剂二	10	
样本	20	20
试剂三	10	10


混匀, 30°C (恒温培养箱) 避光反应 20min (若反应未终止即吸光值还在上升, 须延长反应时间至吸光值不变), 于 450nm 下读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ (每个样本需设置一个对照)。

注意: 本操作流程适用于绝大多数常规样本检测, 实验条件可根据实际样本状态适度微调;

针对特殊类型样本, 我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算:

1、标准曲线方程为 $y = 0.0829x - 0.0098$; x 为谷氨酸含量 (nmol), y 为 ΔA 。

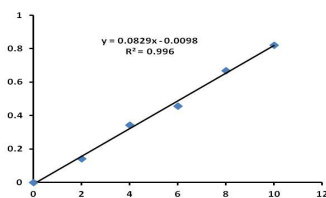

标准曲线示意图

说明: 标准曲线由标准品测定获得, 具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按照样本质量计算:

$$\text{谷氨酸(nmol/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (W \times V1 \div V) \times D = 603.14 \times (\Delta A + 0.0098) \div W \times D$$

$$\text{谷氨酸(μg/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (W \times V1 \div V) \times Mr \times 10^{-3} \times D$$

$$= 88.74 \times (\Delta A + 0.0098) \div W \times D$$

3、按照样本质量计算 (高蛋白含量样本):

$$\text{谷氨酸(nmol/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (W \times V1 \div V2) \times D$$

$$= 603.14 \times (\Delta A + 0.0098) \div W \times V2 \times D$$

$$\text{谷氨酸(μg/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (W \times V1 \div V2) \times Mr \times 10^{-3} \times D$$

$$= 88.74 \times (\Delta A + 0.0098) \div W \times V2 \times D$$

4、按细胞数量计算:

$$\text{谷氨酸(nmol/10}^4\text{cell)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (500 \times V1 \div V) \times D = 603.14 \times (\Delta A + 0.0098) \div 500 \times D$$

$$\text{谷氨酸(μg/10}^4\text{cell)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (500 \times V1 \div V) \times Mr \times 10^{-3} \times D$$

$$= 88.74 \times (\Delta A + 0.0098) \div 500 \times D$$

5、按照液体体积计算:

$$\text{谷氨酸含量(nmol/mL)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (V1 \div V3) \times D = 603.14 \times (\Delta A + 0.0098) \times D$$

$$\text{谷氨酸含量(μg/mL)} = [(\Delta A + 0.0098) \div 0.0829] \div (V1 \div V3) \times Mr \times 10^{-3} \times D = 88.74 \times (\Delta A + 0.0098) \times D$$

V---加入提取液体积, 1 mL;

V1---加入反应体系中样本体积, 0.02mL;

V2---高蛋白含量样本的总提取液体积;

V3---所取液体的体积, 1 mL;

D---稀释倍数, 未稀释即为 1;

W---样本质量, g;

500---细胞数量, 万;

谷氨酸分子量 Mr---147.13。