

Soluble Sugar Content Kit

可溶性糖含量试剂盒说明书

货号: G0501F | 方法: 可见分光法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

糖类物质是构成植物体的重要组成成分之一,也是新陈代谢的主要原料和贮存物质。糖类在浓硫酸作用下经脱水反应生成糠醛或羟甲基糠醛,生成的糠醛或羟甲基糠醛与蒽酮脱水缩合,形成糠醛的衍生物,呈蓝绿色物质,其在可见光区 620nm 波长处有最大吸收,且其光吸收值在一定范围内与糖的含量成正比关系。该方法用于可溶性单糖、寡糖和多糖的含量测定,具有灵敏度高、简便快捷、适用于微量样品的测定等优点。

该方法的特点是几乎可以测定所有的碳水化合物(包括单糖:戊糖、己糖、蔗糖、糖原、多缩葡萄糖等),所以用该方法测出的糖类含量是溶液中全部可溶性糖类含量。

二、试剂盒组分与配制

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉剂×2 瓶	4°C避光保存	
试剂二	液体 5mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	粉剂×1 支	4°C保存	若重新做标曲,则用到该试剂。

工作液配制: 吸取 2mL 试剂二加入到一瓶试剂一中,混匀并充分溶解,即得工作液。
(如难溶解,可超声溶解或者 60°C水浴溶解;剩余试剂 4°C保存一周)。

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、沸水浴、可调式移液器、乙醇、浓硫酸(自备)、研钵、和蒸馏水。

四、可溶性糖含量的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

建议: 选取样本做几个梯度的稀释,选取适合本次实验的稀释倍数 D。

1、样本制备

① 组织样本:

称取 0.1g 样本(若是干样,如烘干烟叶等可取 0.05g;若是水分充足的样本可取 0.2g),先加入 0.8mL 的 80%乙醇(自备:取 80mL 乙醇溶于 20mL 蒸馏水中),冰浴匀浆,倒入有盖离心管中,再用 80%乙醇冲洗研钵并转移至同一 EP 管中,使 EP 管中粗提液终体积定容为 1.5mL(若用自动研磨机可直接加入 1.5mL 的 80%乙醇研磨);置 50°C水浴 20min(封口膜缠紧,防止液体散失,且间隔 2min 振荡混匀一次),冷却后(若有损失,可加 80%乙醇补齐至 1.5mL),12000rpm,室温离心 10min,取上清液备用。

【注】:若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:15 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取约 500 万细菌或细胞至 EP 管中,加入 1.5mL 的 80%乙醇(自备:取 80mL 乙醇溶于 20mL 蒸馏水中)

超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；置 50℃ 水浴 20min（封口膜缠紧，防止液体散失，且间隔 2min 振荡混匀一次），冷却后（若有损失，可加 80%乙醇补齐至 1.5mL），12000rpm，室温离心 10min，取上清液备用。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量(10^4)：提取液(mL)为 500~1000:1.5 的比例进行提取。

③ 液体样本：

澄清的液体样本直接检测，若浑浊则需 12000rpm，室温离心 10min，取上清液备用。

2、上机检测：

- ① 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 620nm，蒸馏水调零。
- ② 调节水浴锅至 95℃，工作液用前需完全溶解。
- ③ 提示：大多数样本可溶性糖含量较高，为使 ΔA 值在 1 以内，实验前可选取几个样本做预测定，用蒸馏水把上清液稀释成不同浓度，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。（强调：严禁稀释加热反应后的混合液，否则会出现浑浊现象）。
- ④ 在 EP 管中依次加入：


试剂名称 (μL)	测定管	空白管（仅做一管）
样本	50	
蒸馏水	150	200
工作液	60	60
浓硫酸(缓慢加入)	500	500

混匀，置 95℃水浴中 10min（盖紧，以防止水分散失），冷却至室温后，取全部澄清液体至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm），于 620nm 读取吸光值 A， $\Delta A = A$ 测定管 - A 空白管。

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准方程为 $y = 3.658x + 0.0203$ ；x 为标准品浓度（mg/mL），y 为吸光值 ΔA 。

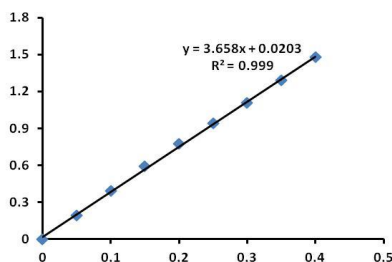

标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本重量计算：

$$\begin{aligned} \text{可溶性糖(mg/g 重量)} &= [(\Delta A - 0.0203) \div 3.658 \times V1] \div (W \times V1 \div V) \times D \\ &= 0.41 \times (\Delta A - 0.0203) \div W \times D \end{aligned}$$

3、按质量分数（%）计算：

$$\begin{aligned} \text{可溶性糖(%重量)} &= [(\Delta A - 0.0203) \div 3.658 \times V1] \div (W \times V1 \div V) \times 10^{-3} \times 100\% \\ &= [0.041 \times (\Delta A - 0.0203) \div W \times D]\% \end{aligned}$$

4、按细菌/细胞数量计算：

$$\begin{aligned} \text{可溶性糖}(\text{mg}/10^4\text{cell}) &= [(\Delta A - 0.0203) \div 3.658] \div (500 \times V1 \div V) \times D \\ &= 0.0008 \times (\Delta A - 0.0203) \times D \end{aligned}$$

5、按液体体积计算：

$$\text{可溶性糖}(\text{mg}/\text{mL}) = (\Delta A - 0.0203) \div 3.658 \times D = 0.273 \times (\Delta A - 0.0203) \times D$$

V---样品提取液总体积，1.5mL； V1---加入样本体积，0.05mL；

W---样本重量，g； 500---细胞数量，万； D---稀释倍数，未稀释即为1。